


ULTRASONIC FACIAL™

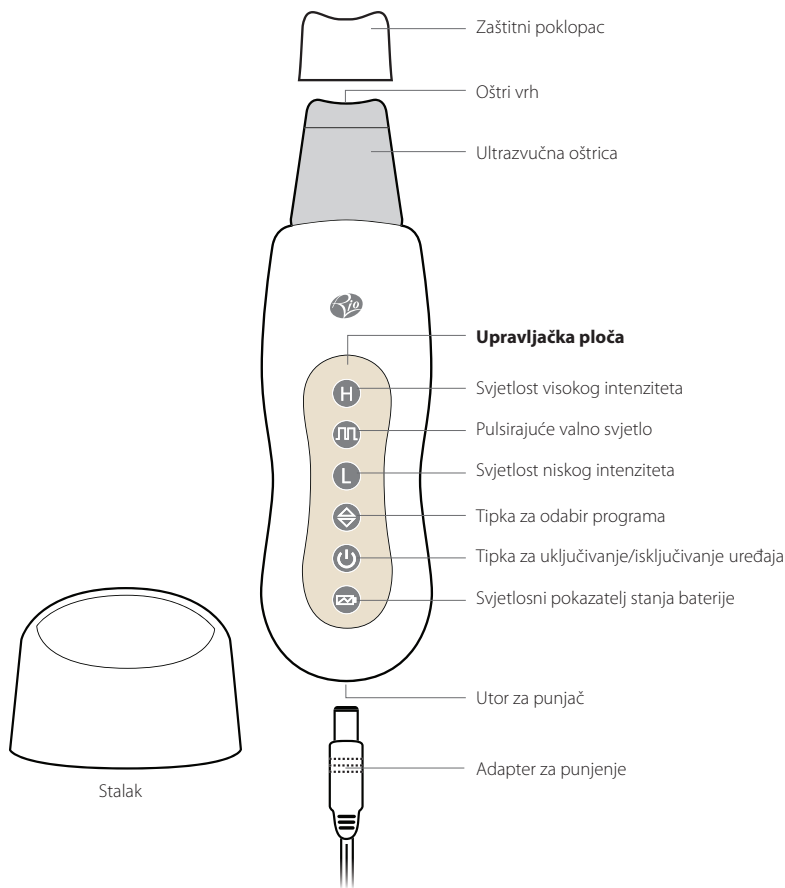


Prije prve uporabe, uređaj je potrebno puniti 8 sati.

MJERE OPREZA

- Pročitajte sve upute detaljno i zadržite ih za daljnju uporabu.
- Ovaj uređaj se NE može koristiti od strane djece u dobi ispod 8 godina kao i kod osoba sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, samo ako su pod nadzorom ili upućeni na korištenje aparata (uređaja) na siguran način i razumiju opasnosti.
- Ne koristite ako ste trudni ili ako imate bilo što od sljedećeg; pacemaker, poremećaj rada srca, ako koristite lijekove za niski krvni tlak, epilepsiju, dijabetes, multiplu sklerozu ili ako se oporavljate od operativnog zahvata.
- Ne koristite uređaj na ožiljcima, oštećenoj koži, rosacei, pustulama, upaljenim aknama, kožnim ekcemima, ako imate upaljenu ili bolesnu kožu ili bilo koju od kožnih oboljenja. Preporučljivo je konzultirati se s liječnikom ako niste sigurni.
- Ako serum dođe u kontakt s očima, isperite temeljito vodom. Ako iritacija ne prestaje obratite se liječniku.
- Samo za vanjsku upotrebu.

DUBINSKO ČIŠĆENJE

Dubinski tretman čišćenja koristi kontinuirane valove kako bi se uklonile mrtve stanice s površine kože čineći kožu osvježenu, pomlađenu i ultra glatkom. Ovaj tretman dubinskog čišćenja uklanja prljavštinu, alergene i nečistoće koji inače ostaju zarobljeni u epidermisu.

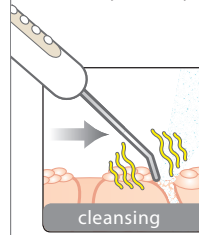


Kako bi postigli željeno dubinsko čišćenje vrh oštrice usmjerava ultrazvučnu vibraciju.

ODABIR PROGRAMA – KONTINUIRANI VALOVI



Uključite uređaj pritiskom na tipku za **uključivanje/isključivanje uređaja**.

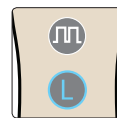

Program kontinuiranih valova niskog intenziteta

Program kontinuiranih valova niskog intenziteta je automatski odabran.




Pritisnite **tipku za odabir programa** dva puta da biste odabrali program kontinuiranih valova visokog intenziteta.



Program kontinuiranih valova visokog intenziteta


Prilikom odabira ovog programa, svjetlost visokog intenziteta će svijetliti plavo.

KAKO KORISTITI

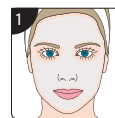

1 Nanesite toplu vodu na lice pomoću blazinica ili ručnika.

Napomena: Za najbolje rezultate koristite nakon kupanja ili tuširanja. Preporučujemo 2-3 tretmana tjedno.

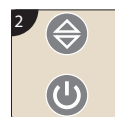


2 Uključite uređaj pritiskom na tipku za Uključivanje/Isključivanje. Odaberite program kontinuiranih valova niskog ili visokog intenziteta.


Preporučujemo da krenete sa programom niskog intenziteta.



3 Držite uređaj tako da je upravljačka ploča **okrenuta suprotno** od vaše kože lica.

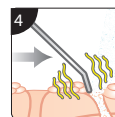

4 Lagano pritišćući krećite se oštricom preko kože prema naprijed. Vidjet ćete nakupinu kapljica vode i mrtve stanice kože na kraju oštrice. Za najbolje rezultate, uzmite si vremena i radite polako neprestano pokrećući oštricu.

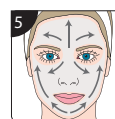


5 Radite planski preko svih područja lica kao što je prikazano na slici.



6 Nakon uporabe, isključite uređaj pritiskom na tipku za isključivanje. Oštrica se može očistiti brisanjem vlažnom krpom. Uređaj čuvajte stavlajući zaštitni poklopac na vrh oštrice. **Napomena:** Ako se ne koristi uređaj će se automatski isključiti nakon 10 minuta automatski.

SONOFOREZA

Sonoforeza je postupak kojim se pulsirajućim valovima poboljšava propusnost kože i postiže učinkovitija apsorpcija seruma. U kombinaciji s ultrazvukom koji poboljšava cirkulaciju, ovo pridonosi efektu "ravnanja" kože, smanjujući sitne linije i bore.

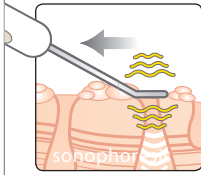

Pozicioniranje oštrice ravno uz kožu postiže se ultrazvučno tapkanje pomoću kojeg serum prodire duboko kroz površinu kože.


ODABIR PROGRAMA – PULSIRAJUĆI VALOVI



Uključite uređaj pritiskom na tipku za **uključivanje/isključivanje uređaja**.




Pritisnite jednom **tipku za odabir programa** kako biste odabrali program pulsirajućih valova niskog intenziteta ili 3 puta za odabir programa pulsirajućih valova visokog intenziteta.

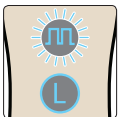

Program pulsirajućih valova niskog intenziteta

Pri odabiru ovog programa čuti ćete povremene zvučne vibracije, svjetlost niskog intenziteta svijetliti će plavo, a pulsirajuće valno svjetlo će bljeskati.

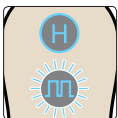

Program pulsirajućih valova visokog intenziteta


Pri odabiru ovog programa čuti ćete povremene zvučne vibracije, svjetlost visokog intenziteta svijetliti će plavo, a pulsirajuće valno svjetlo će bljeskati.

KAKO KORISTITI



Nanesite tanki sloj seruma na Vaše lice.

Napomena: Za najbolje rezultate koristite nakon kupanja ili tuširanja. Preporučujemo 2-3 tretmana tjedno.

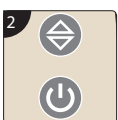


Uključite uređaj pritiskom na tipku za uključivanje/isključivanje. Odaberite program pulsirajućih valova visokog ili niskog intenziteta.


Preporučujemo da krenete sa programom niskog intenziteta.



Držite uređaj tako da je upravljačka ploča **okrenuta prema vašem licu**.

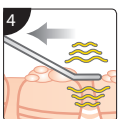

Uz blagi pritisak klizite oštricom po površini kože unatrag. Serum će postepeno prodirati duboko u površinu kože. Za najbolje rezultate, uzmete si vremena i radite polako neprestano pokrećući oštricu.

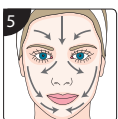

Planski radite preko svih područja lica kao što je prikazano na slici.




Nakon uporabe, isključite uređaj pritiskom na tipku za isključivanje. Oštrica se može očistiti brisanjem vlažnom krpom. Uređaj čuvajte stavljujući zaštitni poklopac na vrh oštrice.


Napomena: Ako se ne koristi uređaj će se automatski isključiti nakon 10 minuta.

PUNJENJE


Prije prve upotrebe, punite uređaj dok se crveno svjetlo ne ugasi. To može trajati i do 8 sati. Kada je baterija slaba, uređaj će se oglasiti 6 puta, a zatim automatski ugasi.

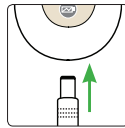

Spojite adapter za punjenje na utor za punjenje i uključite ga u struju.

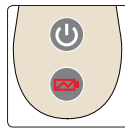

Kada se uređaj puni indikator napunjenosti baterije će svijetliti crveno.

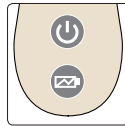

Kada je uređaj potpuno napunjen, svjetlosni indikator napunjenosti baterije će se ugasi i Vaš uređaj je spreman za upotrebu.

Nakon što je punjenje završeno isključite adapter iz uređaja i iz struje.

VAŽNA OBAVIJEST

- Nemojte uranjati ovaj uređaj u vodu.
- Ovaj uređaj nije otporan na vodu, ne stavljajte ga gdje može pasti ili se povući u vodu.
- Uređaj se može očistiti brisanjem vlažnom krpom. Nemojte koristiti otapala ili deterdžente.
- Oštrica se može očistiti brisanjem s toplom vodom. Osušite prije korištenja. Nemojte koristiti otapala ili deterdžente.
- Nemojte postavljati uređaj u blizini izvora topline.
- Nemojte koristiti ovaj uređaj, ako ne radi ispravno, ako je pao ili ako je oštećen.
- Nema dijelova koje sam korisnik treba mijenjati unutar uređaja
- Zloupotreba ovog proizvoda može uzrokovati štetu.

SLUŽBA ZA KORISNIKE

Za sva pitanja i dodatne informacije o korištenju proizvoda i uvjetima jamstva, obratite se ekskluzivnom distributeru i zastupniku proizvoda Rio Beauty:

Zastupnik za RH:

MEDIKOR d.o.o., Jaruščica 9e, 10020 Zagreb
tel: 01 3689 666
fax: 01 3666 000
e-mail: info@medikor.hr
www.medikor.hr

Izjavu o sukladnosti (Declaration of conformity) možete naći na internetskoj adresi www.medikor.info.

ZBRINJAVANJE DOTRAJALOG UREĐAJA

Prema Pravilniku o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom, koji je u skladu s Direktivom 2002/96/EZ o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi za države EU-a, potrebno je vršiti ponovnu uporabu, rastavljanje i uporabu, uključujući i recikliranje EE otpada radi sprječavanja utjecaja na okoliš, odgovarajuće zbrinuti opasne komponente te smanjiti nastajanje otpada. Ovaj proizvod klasificiran je kao Električna ili elektronička oprema stoga molimo da dotrajali uređaj odložite na otpad prema važećim zakonskim odredbama o odlaganju električnog i elektroničkog otpada. EE otpad ne smijete odlagati kao nerazvrstani komunalni otpad, već imate obavezu takav otpad prikupiti odvojeno. (Informacije o zbrinjavanju EE otpada zatražite pozivom na besplatni broj 0800 444 110, ili na www.eeotpad.com). (Za ostale države EU-a odlaganje dotrajalog uređaja potrebno je izvršiti u skladu s Direktivom 2002/96/EC-WEE.)

SPECIFIKACIJE

Adapter za punjenje : Ulaz: 100V–240V 50 Hz Izlaz: 6V DC 1.0A Izlaz: 25KHz Baterija: 3.7V / 950mAh

Pročitajte ove upute pažljivo i čuvajte za buduću uporabu. Ovaj proizvod sadrži Litij-lonsku Bateriju. Ovaj proizvod NIJE prikladan za punjenje u kupaonici. Proizvod je samo za kućnu upotrebu. Ovaj proizvod je u skladu s važećim zakonskim propisima proizvoda EU.



JAMSTVENI LIST I UVJETI JAMSTVA

Hvala Vam što ste kupili Rio proizvod. Svi Rio proizvodi imaju garanciju u trajanju od 2 godine od dana kupnje.

Molimo Vas da čuvate račun i ovjereni jamstveni list kako biste mogli ostvariti pravo na popravak ili zamjenu proizvoda unutar jamstvenog roka. Jamstvo počinje teći od dana prodaje na malo, što se dokazuje ovjerenim jamstvenim listom (naziv i sjedište poduzeća koje je proizvod prodalo na malo, pečat, datum prodaje i potpis prodavatelja) te originalnim računom.

U jamstvenom roku Medikor d.o.o. se obvezuje da će:

1. Omogućiti dijelove potrebne za popravak proizvoda
2. Popraviti proizvod: Kupac šalje neispravan proizvod u servisni centar o trošku prodavatelja
3. Zamijeniti proizvod: Ukoliko se proizvod ne može popraviti biti će zamijenjen novim proizvodom. Kupac šalje neispravan proizvod u servisni centar o trošku prodavatelja.

Napomene!

- Jamstvo **ne pokriva** normalno trošenje i habanje proizvoda. Dijelovi koji su normalno podložni zamjeni nakon određenog vremena, nisu uključeni u jamstvo.
- Jamstvo **ne pokriva** slučajna oštećenja koja su rezultat nemara, neispravne i neoprezne uporabe, zanemarivanja uputstava ili uporabe proizvoda na drugačiji način od onog propisanog u uputstvima.
- Rio proizvod popravljiva isključivo Medikor d.o.o. Da biste ostvarili jamstvo potrebno je donijeti račun odnosno dokaz o kupnji proizvoda. Ukoliko kupac ne posjeduje račun trošak popravka proizvoda snosi kupac.
- Popravak ili zamjena Rio proizvoda tijekom jamstvenog roka neće produžiti jamstveni rok.

Tip/model proizvoda:

Serijski broj proizvoda:

Žig i adresa prodajnog mjesta s datumom prodaje:

Opis kvara:

Ime i prezime kupca:

Adresa kupca:

Izjavu o sukladnosti (Declaration of conformity) možete naći na internetskoj adresi www.medikor.info

Zastupnik za Hrvatsku:

MEDIKOR d.o.o.
OIB: 67863378582
Adresa: Jarušćica 9E, Zagreb
Tel: 00 385 1 3689 699
e-mail: info@medikor.hr
www.medikor.hr

Ovlašteni servis za Hrvatsku:

MEDIKOR d.o.o.
OIB: 67863378582
Fallerovo šetalište 22, Zagreb
Tel: 00 385 1 3667 212
e-mail: servis@medikor.hr

